



AEROSOLAK AEROSOLAS

Aerosol arruntak, ganbera zabaltzaileei akoplatuak

1. Kendu tapa eta eutsi inhalagailuari L-
posizioan eta bertikalean (ahokoa beheko
aldean).
2. Astindu inhalagailua.
3. Akoplatu ganbera zabaltzaileari.
4. Sakatu MDIaren metalezko kartutxoa,
dosi bakar bat hartuta.
5. Ahokoa ipini ahoan, inguruan ezpainak
ondo estututa (edo ipini maskara
aurpegian, ahoa eta sudurra estalita,
baldin eta maskara erabiltzen bada).
6. Hartu arnasa eta bota astiro-astiro ahotik,
bost bider gutxienez.


Dosi gehiago hartu behar badira, itxaron
minutu bat eta egin berriz aurreko
urratsak, baina 2. puntutik hasita.

Aerosoles convencionales acoplados a cámaras espaciadoras

1. Retirar la tapa y sostener el inhalador en
posición de L y en vertical (boquilla en la
parte inferior).
2. Agitar el inhalador.
3. Acoplarlo a la cámara espaciadora.
4. Pulsar el cartucho de metal del MDI
dispensando una única dosis.
5. Colocar la boquilla en la boca apretando
bien los labios a su alrededor (o aplicar la
mascarilla sobre la cara cogiendo boca y
nariz, si se usa mascarilla)
6. Inspirar y espirar lentamente por la boca,
haciendo un mínimo de 5 inspiraciones.

Si se precisa repetir más dosis, esperar un
minuto y repetir desde el punto 2.

Babyhaler ganbera (bularreko haurrentzako maskarekin)
Cámara Babyhaler (con mascarilla para lactantes)

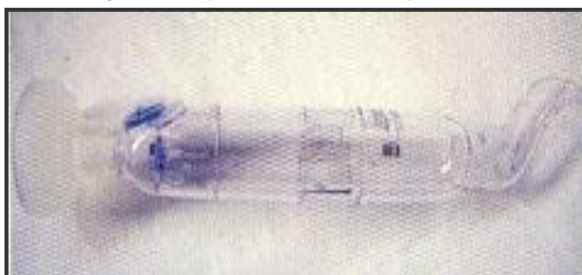

Volumatic/Fisionair ganbera
Cámara Volumatic/Fisionair

